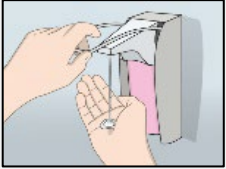
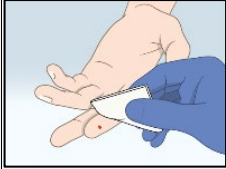

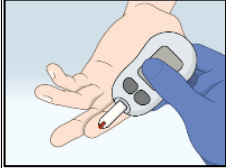
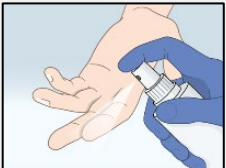
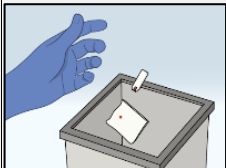

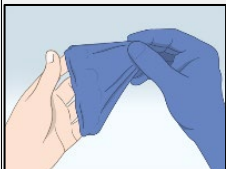

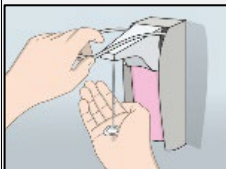


Checkliste Blutzucker messen

1	<input type="checkbox"/>		Hygienische Händedesinfektion, Patient:in Hände waschen lassen	6	<input type="checkbox"/>		ggf. ersten Blutstropfen mit Tupfer abwischen
2	<input type="checkbox"/>		Handschuhe anlegen	7	<input type="checkbox"/>		Blutstropfen mit dem Teststreifen berühren (Signal beachten), Tupfer auf die Punktionsstelle drücken bis die Blutung zum Stillstand gekommen ist
3	<input type="checkbox"/>		Hautdesinfektion an Finger oder ggf. Ohr durchführen	8	<input type="checkbox"/>		Gebrauchte Materialien fachgerecht verwerfen
4	<input type="checkbox"/>		Teststreifen in das Messgerät einführen	9	<input type="checkbox"/>		Handschuhe ablegen
5	<input type="checkbox"/>		Punktion im seitlichen Bereich der Fingerkuppe nach Abtrocknung des Hautdesinfektionsmittels	10	<input type="checkbox"/>		Hygienische Händedesinfektion

Material-Checkliste:

- Händedesinfektionsmittel
- Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Handschuhe
- Blutzuckermessgerät mit neuen Teststreifen
(Code muss übereinstimmen!)
- Sterile Einstichhilfe mit neuer Lanzette
- Keimarme Tupfer

